


Pregnancy detection in

**Whole blood/serum/plasma
28-day serum/plasma/35-day whole blood**

Bignano


Ringbio

bovine pregnancy rapid test kit

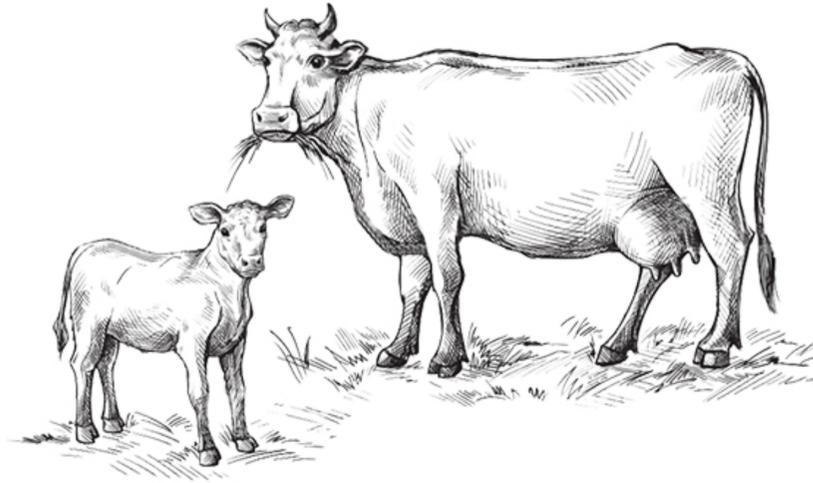


Operations


- 1) Read the instructions before experiment. Serum samples should be freshly collected or should be frozen at -20°C or below. Bring the test kit and the test samples to room temperature ($20-30^{\circ}\text{C}$).
- 2) Take test card needed from the kit package, and make proper marks. Please use the test strips within 1h. Return the rest into cold storage.
- 3) Take 60ul serum/plasma sample into the sample well on the test card, then add 60ul (2 drops) of sample buffer with the buffer vial in the kit. Make sure the buffer vial is empty after adding.
- 4) Wait for 15min and then determine the result according to Part 4. Results observed after 30min is invalid.

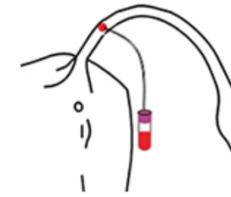


Blood sample
रक्त नमूना

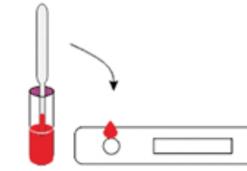

One drop of blood
खून की एक बूंद

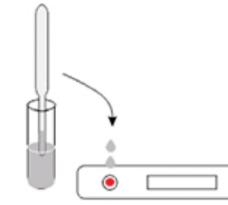

Two drops of buffer
बफर की दो बूँदें

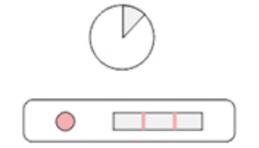


Wait 15min and check result
15 मिनट प्रतीक्षा करें और परिणाम देखें

Result determination

There are 2 lines on the test card, Control Line, Test Line. Test results will depend on the color of these lines.
Positive (+): Line C and line T are visible and red.
Negative (-): Line C is red, and Line T is not visible.
Invalid (x): Line C has no color. In this case, please read the instructions and repeat assay with new test card.
Incomplete control line or incomplete test line is still VALID.
Note: positive result needs to be confirmed by testing of sample from the cow on the next day.

परिणाम निर्धारण

टेस्ट कार्ड पर 2 लाइनें हैं, कंट्रोल लाइन, टेस्ट लाइन। परीक्षण के परिणाम इन रेखाओं के रंग पर निर्भर करेंगे।
सकारात्मक (+): रेखा सी और रेखा टी दृश्यमान और लाल हैं।
नकारात्मक (-): रेखा C लाल है, और रेखा T दिखाई नहीं दे रही है।
अमान्य (X): रेखा C में कोई रंग नहीं है। इस मामले में, कृपया निर्देश पढ़ें और नए परीक्षण कार्ड के साथ परख दोबारा करें। अपूर्ण नियंत्रण रेखा या अपूर्ण परीक्षण रेखा अभी भी वैध है।

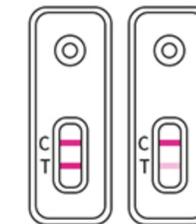

Positive
Sakaaraatmak
गर्भावस्था



Negative
Nakaaraatmak
कुछ भी नहीं



Invalid
amaany
गडबड